

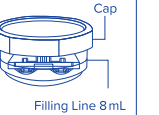
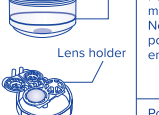
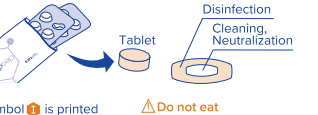
ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning and storing system for soft contact lenses.
FOR ALL SOFT CONTACT LENSES INCLUDING SILICONE HYDROGEL LENSES

Read this instruction sheet carefully before using **cleadew**, and keep it for future reference.
To avoid eye infections or damage, always follow the user instructions.

COMPOSITION AND DESCRIPTION

Do not use **cleadew** if allergic to any of the ingredients used in **cleadew**.

cleadew Lens case	cleadew I (Disinfecting, Neutralizing, and Cleaning Tablet)	cleadew II (Dissolving & Rinsing Solution)
 Filling Line 8 mL  R = Right L = Left	 Symbol I is printed ⚠ Do not eat Povidone-iodine in the tablet quickly destroys harmful microorganisms, including Bacteria, Fungi, and Acanthamoeba. Next, the Ascorbic acid in the tablet neutralizes the povidone-iodine to a safe level. Finally, the included proteolytic enzyme completely removes protein deposits. Povidone-iodine (4.0 mg/tablet), Ascorbic acid (2.0 mg/tablet), and Proteolytic enzyme (0.5 mg/tablet)	 Symbol II is printed This solution is used for dissolving cleadew I and rinsing lenses. Hydrogen peroxide as preservative (0.004%) ⚠ Boric acid

USER INSTRUCTIONS



1

Open the lens holders and place each lens on each dome. Close the lens holders with care.



2

Place a tablet of **cleadew I** in the lens case, place it in the centre of the bottom. Fill the case with **cleadew II** up to the filling line. Close the cap tightly. Do not use tablet if discoloured or broken.



3

Orange
Clear
Disinfecting
Cleaning
Soak the lenses for at least 4 hours. Cleaning process begins after the solution colour changes.



4

Check colour!
Ensure that solution and lens are completely clear. If orange colour remains even after 4 hours, see PRECAUTIONS below.



5

Remove the lenses.



6

Rinse lenses in the palm of your hand with **cleadew II** before wearing them.

STORAGE

After completing the above steps, in case of storing the lens for more than 24 hours, you should replace the solution with **cleadew II**.
You may store the lens in the unopened lens case up to 7 days, and then repeat the care steps from the beginning before wearing your lens.

WARNINGS

- Do not use **cleadew** if allergic to any of the ingredients used in **cleadew**.
- If you experience persistent eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eye, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use **cleadew** with any eye medication or other contact lens care products.

PRECAUTIONS

- Read this instruction sheet carefully before using **cleadew** and keep it for future reference. To avoid eye infections, always follow the user instructions.
- Do not reuse the solution. (The solution after lens care is neutralized and cannot disinfect the lens. To prevent eye infection, do not reuse the solution).
- If the solution does not turn orange after you have added a tablet, discard the solution, wash and dry the lens case, and then repeat the care steps from the beginning, in accordance with the user instructions.
- Do not wear your lenses if the orange stain persists.
- Consult your eye care practitioner if you have worn un-neutralized lenses.
- Ensure that solution and lens are completely clear before wearing the lenses. If orange colour remains after 4 hours, lightly shake the lens case and leave it aside for 20–30 minutes. Check if the colour has disappeared. If orange colour persists, discard solution and repeat care steps from the beginning.
- After each use, discard any **cleadew** solution that remains in the lens case.
- After each use of **cleadew**, wash the lens case with sterile saline solution and allow it to air dry.
- Children should not use **cleadew** by themselves; parents are requested to be responsible for their daily care.
- Use only the specially designed lens case provided with **cleadew**.
- Discard any remaining solution 3 months after opening the bottle.
- Always use **cleadew I** and **cleadew II** together.
- Close bottle tightly after use.
- Do not use **cleadew** with hard or rigid gas permeable lenses.
- Do not swallow the solution or the tablets.
- Do not touch the tip of **cleadew II** to avoid contamination.
- Do not use **cleadew** for heat disinfection.
- Do not use tablet if broken.
- Do not use **cleadew** after the expiry date.
- Do not use the solution or tablet if it is discoloured.
- Do not use **cleadew** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not replace **cleadew I** with any other container.
- Do not use **cleadew** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminium package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitive to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.
- Do not use **cleadew** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not replace **cleadew I** with any other container.
- Do not use **cleadew** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminium package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitive to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.
- Do not use **cleadew** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not replace **cleadew I** with any other container.
- Do not use **cleadew** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminium package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitive to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.

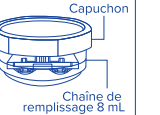
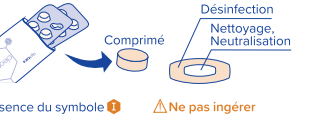
FRANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact souples.
POUR TOUS LES TYPES DE LENTILLES DE CONTACT SOUPLES, Y COMPRIS LES LENTILLES EN SILICONE HYDROGEL

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadew** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.

COMPOSITION ET DESCRIPTION

N'utilisez pas **cleadew** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.

cleadew Étui à lentilles	cleadew I (Comprimés désinfectants, neutralisants, et nettoyants)	cleadew II (Solution de dissolution et de rinçage)
 Chaîne de remplissage 8 mL  R = Droite L = Gauche	 Présence du symbole I ⚠ Ne pas ingérer La povidone iodée dans le comprimé détruit instantanément les micro-organismes nocifs tels que les bactéries, les moisissures et l'acanthamoeba. Ensuite, la povidone iodée est neutralisée à un niveau sûr par l'acide ascorbique. Enfin, les enzymes protéolytiques présentes éliminent complètement les dépôts protéiques. Povidone iodée (4.0 mg/comprimé), acide ascorbique (2.0 mg/comprimé), et enzymes protéolytiques (0.5 mg/comprimé)	 Présence du symbole II Cette solution est utilisée pour dissoudre cleadew I ainsi que pour rincer les lentilles. Péroxyde d'hydrogène comme conservateur (0.004 %) ⚠ Acide borique

CONSIGNES D'UTILISATION



1

Ouvrez l'étui et placez une lentille sur chaque support. Fermez l'étui soigneusement.



2

Ajoutez un comprimé de **cleadew I** dans l'étui à lentilles, placez-le au centre du fond. Remplissez l'étui avec **cleadew II** jusqu'à la chaîne de remplissage. Refermez l'étui soigneusement. N'utilisez pas de comprimé décoloré ou cassé.



3

Orange
Transparent
Désinfection
Nettoyage
Laissez tremper les lentilles pendant au moins 4 heures. Le processus de nettoyage commence lorsque la solution change de couleur.



4

Vérification de la couleur!
Assurez-vous que la solution et les lentilles sont entièrement incolores. Voyez les PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ci-dessous si la présence de la couleur orange persiste après 4 heures.



5

Retirez les lentilles.



6

Rincez les lentilles dans la paume de la main avec **cleadew II** avant de les porter.

CONSERVATION

Une fois les étapes décrites ci-dessus terminées, il est nécessaire de remplacer la solution **cleadew II** en cas de conservation des lentilles dans l'étui pendant plus de 24 heures.
Les lentilles peuvent être conservées dans un étui à lentilles fermé jusqu'à 7 jours. Dans ce cas, avant de porter les lentilles, il est nécessaire de répéter les étapes de soin depuis le début.

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas **cleadew** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans **cleadew**.
- En cas de sensation d'inconfort aux yeux permanent, d'un larmoiement excessif, de changements dans la vision, ou de rougeurs aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez votre ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires.
- N'utilisez pas **cleadew** en même temps qu'un médicament pour les yeux ou qu'un autre produit d'entretien pour lentilles de contact.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadew** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Ne réutilisez pas la solution. (Après l'entretien des lentilles, la solution est neutralisée et ne peut plus désinfecter d'autres lentilles. Pour éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas la solution).
- N'utilisez pas de **cleadew** avec des lentilles anciennes.
- Si, après avoir introduit un comprimé, la solution ne devient pas orange, jetez la solution, lavez et séchez l'étui à lentilles puis recommencez les étapes de soin depuis le début selon ce mode d'emploi.
- Ne portez pas les lentilles si la tâche orange persiste.
- Consultez un spécialiste de soins oculaires quand vous avez porté des lentilles non neutralisées.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitive to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.
- Do not use **cleadew** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not replace **cleadew I** with any other container.
- Do not use **cleadew** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminium package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitive to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.
- Do not use **cleadew** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not replace **cleadew I** with any other container.
- Do not use **cleadew** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminium package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitive to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.

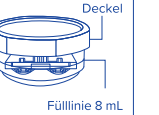
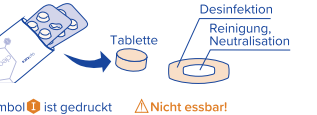
DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem für weiche Kontaktlinsen.
FÜR ALLE WEICHEN KONTAKTLINSEN EINSCHLIESSLICH SILIKON-HYDROGEL-LINSEN

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie **cleadew** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.

ZUSAMMENSETZUNG UND BESCHREIBUNG

Benutzen Sie **cleadew** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.

cleadew Kontaktlinsenbehälter	cleadew I (desinfizierende, neutralisierende und reinigende Tablette)	cleadew II (Lösung zum Reinigen und Abspülen)
 Fülllinie 8 mL  R = rechts L = links	 Symbol I ist gedruckt ⚠ Nicht essen! Das Povidon-Iod in der Tablette zerstört schädliche Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilzen und Acanthamoeba. Als nächstes neutralisiert die Ascorbinsäure das Povidon-Iod auf ein sicheres Niveau. Schließlich entfernt das proteolytische Enzym, das beigefügt wurde, noch vollständig alle Proteinablagerungen. Povidon-Iod (4.0 mg/tablette), Ascorbinsäure (2.0 mg/tablette) und proteolytisches Enzym (0.5 mg/tablette)	 Symbol II ist gedruckt Mit dieser Flüssigkeit wird cleadew I aufgelöst und die Kontaktlinsen gereinigt. Wasserstoffperoxid als Konservierungsstoff (0.004 %) ⚠ Borsäure

GEBRAUCHSANWEISUNG



1

Öffnen Sie die Linsenhalter und legen Sie je eine Linse in eine der Mulden. Vorsicht beim Schließen der Linsenhalter.



2

Geben Sie ein Tablette **cleadew I** in das Linsenbehältnis und platzieren Sie diese in der Mitte des Bodens. Füllen Sie den Behälter mit **cleadew II** bis zur Fülllinie. Nach Gebrauch den Deckel fest verschließen. Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie zerbrochen oder verfärbt ist.



3

Orange
Klar
Desinfektion
Reinigung
Weichen Sie die Linsen mindestens 4 Stunden lang ein. Der Reinigungsvorgang beginnt, wenn sich die Farbe der Lösung verändert.



4

Prüfen Sie die Farbe!
Stellen Sie sicher, dass die Lösung und die Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orangefarbene Lösung nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, lesen Sie bitte die SICHERHEITSHINWEISE unten.



5

Entnehmen Sie die Kontaktlinsen.



6

Spülen Sie die Linsen vor dem Einsetzen in Ihrer Handfläche mit **cleadew II** ab.

AUFBEWAHRUNG

Nachdem Sie die oben angeführten Schritte ausgeführt haben und die Kontaktlinsen länger als 24 Std. aufbewahren möchten, ist es empfehlenswert die Lösung gegen **cleadew II** auszutauschen.
Sie können die Kontaktlinsen in dem ungeöffneten Behälter bis zu 7 Tage aufbewahren. Danach wiederholen Sie bitte die Pflegeschritte, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen tragen.

WARNUNGEN

- Benutzen Sie **cleadew** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Augenarzt.
- Benutzen Sie bitte **cleadew** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie **cleadew** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Um Augeninfektionen zu verhindern, befolgen Sie bitte immer die Gebrauchsanweisungen.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut. (Die Lösung nach der Linsenpflege ist neutralisiert und kann die Linse nicht desinfizieren. Um eine Augeninfektion zu vermeiden, verwenden Sie die Lösung nicht erneut).
- Färbt sich die Lösung nicht orange, nachdem Sie die Tablette in die Lösung gelegt haben, schützen Sie die Lösung weg, waschen und trocknen Sie den Kontaktlinsenbehälter und wiederholen Sie die die Pflegeschritte von vorn, wie Sie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.
- Tragen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen nicht, wenn Sie weiterhin orange gefärbt sind.
- Konsultieren Sie Ihren Augenarzt, wenn Sie nicht neutralisierte Kontaktlinsen getragen haben.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen sicher, dass die Lösung und Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orangefarbene Lösung nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, schützen Sie den Behälter leicht, bis die Farbe verschwindet. Wenn die orangefarbene Lösung verschwindet, entsorgen Sie die Lösung und führen Sie die Pflegeschritte von vorne durch.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die im Kontaktlinsenbehälter verbleibende **cleadew**-Lösung.
- Benutzen Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.
- Borsäure ist fortpflanzungsgefährdend und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Obwohl dieses Produkt auch Borsäure enthält, liegt die Menge an Borsäure in diesem Produkt in einer Konzentration vor, die keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Kinder sowie schwangere bzw. stillende Frauen sicher, sofern die Anweisungen des Produkts befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Für empfindliche Personen empfiehlt es sich, die Linse vor dem Tragen mit steriler Kochsalzlösung abzuspülen.
- Benutzen Sie **cleadew** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Augenarzt.
- Benutzen Sie bitte **cleadew** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten.
- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie **cleadew** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Um Augeninfektionen zu verhindern, befolgen Sie bitte immer die Gebrauchsanweisungen.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut. (Die Lösung nach der Linsenpflege ist neutralisiert und kann die Linse nicht desinfizieren. Um eine Augeninfektion zu vermeiden, verwenden Sie die Lösung nicht erneut).
- Färbt sich die Lösung nicht orange, nachdem Sie die Tablette in die Lösung gelegt haben, schützen Sie die Lösung weg, waschen und trocknen Sie den Kontaktlinsenbehälter und wiederholen Sie die die Pflegeschritte von vorne durch, wie Sie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.
- Tragen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen nicht, wenn Sie weiterhin orange gefärbt sind.
- Konsultieren Sie Ihren Augenarzt, wenn Sie nicht neutralisierte Kontaktlinsen getragen haben.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen sicher, dass die Lösung und Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orangefarbene Lösung nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, schützen Sie den Behälter leicht, bis die Farbe verschwindet. Wenn die orangefarbene Lösung verschwindet, entsorgen Sie die Lösung und führen Sie die Pflegeschritte von vorne durch.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die im Kontaktlinsenbehälter verbleibende **cleadew**-Lösung.
- Benutzen Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.
- Borsäure ist fortpflanzungsgefährdend und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Obwohl dieses Produkt auch Borsäure enthält, liegt die Menge an Borsäure in diesem Produkt in einer Konzentration vor, die keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Kinder sowie schwangere bzw. stillende Frauen sicher, sofern die Anweisungen des Produkts befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Für empfindliche Personen empfiehlt es sich, die Linse vor dem Tragen mit steriler Kochsalzlösung abzuspülen.
- Benutzen Sie **cleadew** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Augenarzt.
- Benutzen Sie bitte **cleadew** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten.

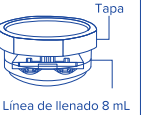
ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza y almacenamiento para lentes de contacto blandas
PARA TODAS LAS LENTES DE CONTACTO BLANDAS, INCLUIDAS LAS DE HIDROGEL DE SILICONA

Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de usar **cleadew** y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones y daño en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN

No utilice **cleadew** si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

cleadew Estuche para lentes	cleadew I (Comprimidos desinfectantes, neutralizantes y limpiadores)	cleadew II (Solución de limpieza y enjuague)
 Línea de llenado 8 mL  R = derecha L = izquierda	 El símbolo I va impreso en el envoltorio ⚠ No ingerir La iodopovidona contenida en el comprimido destruye rápidamente los microorganismos nocivos, incluidos las bacterias, los hongos y el Acanthamoeba. Luego, el ácido ascórbico neutraliza la iodopovidona hasta alcanzar el nivel de seguridad. Por último, la enzima proteolítica elimina completamente los depósitos de proteínas. Iodopovidona (4.0 mg/comprimido), ácido ascórbico (2.0 mg/comprimido) y enzima proteolítica (0.5 mg/comprimido)	 El símbolo II va impreso en el bote Esta solución se utiliza para disolver los comprimidos cleadew I y enjuagar las lentes. Péroxido de hidrógeno como conservante (0.004 %) ⚠ Ácido bórico

INSTRUCCIONES DEL USUARIO



1

Abra el portatlentes y coloque cada lente en su casillero correspondiente. Cierre el portatlentes con cuidado.



2

Coloque un comprimido **cleadew I** en el estuche para lentes situándolo en el centro del fondo. Llene el estuche con **cleadew II** hasta la línea indicada. Cierre la tapa firmemente. No utilice el comprimido si está decolorado o roto.



3

Anaranjado
Transparente
Desinfección
Limpieza
Deje las lentes en remojo durante al menos 4 horas. El proceso de limpieza empieza después de que la solución haya cambiado de color.



4

¡Compruebe el color!
Asegúrese de que la solución y las lentes son completamente transparentes. Si el color anaranjado permanece aun después de 4 horas, léase las PRECAUCIONES de abajo.



5

Retire las lentes.



6

Enjuague las lentes en la palma de su mano con **cleadew II** antes de aplicarlas.

CONSERVACIÓN

En caso de que deje las lentes durante más de 24 horas, tras completar los pasos anteriores, se recomienda reemplazar la solución con **cleadew II**.
Si desea guardar las lentes en el estuche sin abrir hasta un máximo de 7 días y luego repetir los pasos para el cuidado de sus lentes desde el principio antes de volver a utilizarlas.

ADVERTENCIAS

- No utilice **cleadew** si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si experimenta cualquier molestia ocular persistente, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento del (de los) ojos, quite las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un especialista en el cuidado de los ojos.
- No utilice **cleadew** con ningún medicamento para los ojos u otros productos para el cuidado de las lentes de contacto.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de utilizar **cleadew** y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.
- No reutilice la solución. (La solución después del cuidado de la lente está neutralizada y no puede desinfectar la lente. Para evitar una infección ocular, no reutilice la solución).
- Si la solución no se torna anaranjada después de que haya añadido el comprimido, deseche la solución, lave y seque el estuche y repita los pasos para el cuidado de sus lentes desde el principio de acuerdo con las instrucciones del usuario.
- No lleve sus lentes si la mancha anaranjada persiste.
- Si ha usado lentes no neutralizadas, consulte con su especialista en el cuidado de los ojos.
- Asegúrese de que la solución y las lentes son completamente transparentes antes de usar las lentes. Si el color anaranjado permanece aun después de 4 horas, agite ligeramente el estuche hasta que el color desaparezca. Si el color anaranjado persiste, deseche la solución y repita los pasos para el cuidado de sus lentes desde el principio.
- Deseche cualquier resto de solución **cleadew** que quede en el estuche para lentes después de cada uso.
- Lave el estuche con solución salina estéril y deje que se seque al aire después de cada uso de **cleadew**.
- Los niños no deben utilizar **cleadew** por sí mismos; solicítanos amablemente a los padres que se encarguen del cuidado diario de las lentes de sus hijos.
- Utilice solamente el estuche para lentes con un diseño especial que acompaña **cleadew**.
- Deseche la cantidad de solución que quede 3 meses después de abrir el bote.
- Utilice siempre juntos **cleadew I** y **cleadew II**.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- No utilice **cleadew** para lentes duras o rígidas permeables al gas.
- No se trague la solución o los comprimidos.
- No toque la punta de **cleadew II** para evitar la contaminación.
- Lea atentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadew** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Non riutilizzare la soluzione. (Dopo il trattamento delle lenti, la soluzione è neutralizzata e non è più in grado di disinfettare le lenti. Per evitare infezioni oculari, non riutilizzare la soluzione).
- Se la soluzione non diventa arancione dopo avere aggiunto una compressa, smetta di usare la soluzione, lavare e asciugare il portatlenti e ripetere le fasi di cura dall'inizio, come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Non indossare le lenti se il colore arancione persiste.
- Consultare uno specialista se sono state indossate lenti non neutralizzate.
- Prima di indossare le lenti, assicurarsi che non ci siano residui di colore né sulle lenti né nella soluzione. Se l'arancione è ancora visibile dopo 4 ore, dissolverlo scuotendo il portatlenti. Se il colore resta, gettare la soluzione e ripetere le fasi di cura dall'inizio.
- Dopo ogni utilizzo, eliminare l'eventuale soluzione **cleadew** rimasta nel portatlenti.
- Non toccare la punta di **cleadew II** per evitare la contaminazione.
- Non utilizzare **cleadew** per disinfettare a caldo.
- Non utilizzare compresse danneggiate.
- Non utilizzare **cleadew** dopo la data di scadenza.

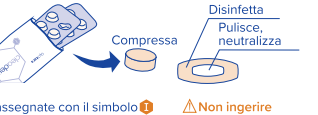
ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lenti a contatto morbide.
PER TUTTE LE LENTI A CONTATTO MORBIDE, INCLUSE LENTI IN SILICONE IDROGEL

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadew** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti che compongono **cleadew**.

cleadew Portatlenti	cleadew I (compresse disinfettanti, neutralizzanti e pulenti)	cleadew II (disciolvente e soluzione per il risciacquo)
 Línea di riempimento 8 mL  R = destra L = sinistra	 Contrassegnate con il simbolo I ⚠ Non ingerire Lo iodopovidone presente nella compressa distrugge rapidamente i microrganismi nocivi, compresi batteri, funghi e acanthamoeba. Successivamente, l'acido ascorbico presente nella compressa neutralizza lo iodopovidone portandolo a un livello sicuro. Infine, l'enzima proteolitico incluso rimuove completamente i depositi proteici. Iodopovidone (4.0 mg/compressa), acido ascorbico (2.0 mg/compressa) e enzima proteolitico (0.5 mg/compressa)	 Contrassegnata con il simbolo II Questa soluzione serve a dissolvere cleadew I e a risciacquare le lenti. Perossido di idrogeno come conservante (0.004%) ⚠ Acido bórico</