

NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

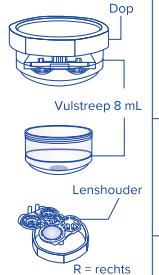
Systeem voor het desinfecteren, reinigen en bewaren van zachte contactlenzen.

VOOR ALLE ZACHTE CONTACTLENZEN, MET INBEGRIJP VAN SILICONE HYDROGEL LENZEN

Lees deze aanwijzingen goed door alvorens cleadow te gebruiken en bewaar ter referentie. Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwgezet op om mogelijke infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.

SAMENSTELLING EN BESCHRIJVING

Gebruik cleadow niet indien u allergisch bent voor een van de in cleadow gebruikte bestanddelen.

cleadow Lenzenhouder	cleadow 1 (Tablet voor desinfecteren, neutraliseren en reinigen)	cleadow 2 (Vloeistof voor oplossen en afspoelen)
		
	Voorzien van symbool 1. Niet voor consumptie.	Voorzien van symbool 2.
	Povidon-jodium in de tablet vernietigt snel schadelijke micro-organismen, inclusief bacteriën, schimmels en acanthamoeba. Vervolgens neutraliseert het ascorbinezuur in de tablet het povidon-jodium tot een veilig niveau. Als laatste desinfecteert de aanwezigte proteolytische enzymen de proteïne-aftzetting in zijn geheel.	Deze vloeistof wordt gebruikt voor het oplossen van cleadow 1 en het afspoelen van lenzen.
	Povidon-jodium (4.0 mg/tablet), ascorbisch zuur (2.0 mg/tablet) en proteolytische enzymen (0.5 mg/tablet)	Waterstofperoxide ter conservering (0,004%) Boorzuur

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK



1

Open de lenzenhouders en plaats op elk oog een lenshouder. Sluit de lenzenhouders voorzichtig.



2

Stop een tablet cleadow 1 in de lenshouder, leg in het midden van de bodem. Vul het bakje met cleadow 1 tot de vulstreep. Sluit vervolgens de dop dicht. Gebruik geen tabletten die zijn verkleurd of gebroken.



3

Desinfecteren Reinigen

Laat de lenzen ten minste 4 uur weken. Het reinigen start nadat de vloeistof van kleur verandert.



4

Controleer de kleur!

Controleer of de oplossing en lens geheel helder zijn. Zie WAARSCHUWINGEN hieronder indien de oranje kleur na 4 uur nog zichtbaar is.



5

Verwijder de lenzen.



6

Spoel de lensen af in uw handpalm met cleadow 2 alvorens ze te dragen.

BEWAREN

Wanneer u na het reinigen van de lenzen volgens de hierboven genoemde stappen uw lenzen langer dan 24 uur wilt bewaren, dient u de lenzenvloeistof in uw lenshouder te vervangen door cleadow 1. U kunt uw lenzen dan maximaal 7 dagen bewaren in een ongeopende lenshouder. Na 7 dagen dient u de bovenvermelde reinigingsprocedure te herhalen, voordat u uw lenzen gaat dragen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik cleadow niet indien u allergisch bent voor een van de in cleadow gebruikte bestanddelen.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van aanhoudende last van uw ogen, overmatig tranen, verandering in zicht of rode ogen.
- Gebruik cleadow niet in combinatie met oogmedicatie of andere verzorgingsproducten voor contactlenzen.

VOORZORGEN

- Lees deze aanwijzingen goed door alvorens cleadow te gebruiken en bewaar ter referentie. Voorkom ooginfectie en volg derhalve altijd de aanwijzingen voor gebruik op.
- Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof die overblijft na het onderhoud van de lenzen is niet-gegeneraliseerd en kan de lenzen niet meer desinfecteren. Gebruik de vloeistof niet opnieuw. Dit kan leiden tot infectie van de ogen).
- Indien de vloeistof niet oranje kleurt na het toevoegen van een tablet, moet u de vloeistof weggoien, de lenzenhouder wassen en drogen en vervolgens de procedure voor het verzorgen weer vanaf de eerste stap uitvoeren.
- Draag de lenzen niet indien er nog oranje vlekjes op zitten.
- Raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist indien u niet-gegeneraliseerde lenzen heeft gedragen.
- Verzeker u ervan dat de oplossing en lenzen geheel helder zijn alvorens de lenzen te dragen. Indien een oranje kleur na 4 uur nog zichtbaar is, moet u het lenzenbakje even licht schudden en het 20-30 minuten laten staan. Indien de oranje kleur zichtbaar blijft, moet u de oplossing weggoien en de procedure voor het verzorgen weer vanaf de eerste stap uitvoeren.
- Gooi na ieder gebruik de in de lenzenhouder resterende cleadow vloeistof weg.
- Was het lenzenbakje met een steriele saline-oplossing en droog met lucht na ieder gebruik.
- Kinderen mogen cleadow niet zelf gebruiken; een volwassene moet verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde, speciaal voor cleadow ontworpen lenzenhouder.
- Gooi resterende vloeistof 3 maanden na het openen van de fles weg.
- Gebruik cleadow 1 en cleadow 2 altijd in combinatie.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- cleadow niet gebruiken met harde of vormstabiele lenzen (RGP-lenzen).
- Vloeistof of tabletten niet inslikken.
- Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van cleadow 2 niet aan.
- cleadow niet gebruiken voor hitte-desinfectie.
- Gebruik geen gebroken tablet.
- Gebruik cleadow niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Gebruik de vloeistof of tablet niet indien deze van kleur is veranderd.
- cleadow niet gebruiken indien het zegel is beschadigd of ontbreekt.
- Gebruik geen kraanwater voor het bewaren en spoelen van lenzen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur en uit het directe zonlicht.
- Gebruik cleadow 1 niet in een ander bakje of houder.
- cleadow niet gebruiken met een oude lenzenhouder.
- Gebruik altijd de nieuwe, bijgeleverde lenzenhouder.
- Gebruik de tablet direct na het openen van de verpakking.
- Bewaar de tabletten in de aluminium verpakking wanneer u deze niet gebruikt.
- Raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij innname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij innname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Het kan de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Het kan de ontwikkeling van het kind beïnvloeden.
- Als u een oplossing wilt maken, moet u de instructies voor juist gebruik van het product worden opgevolgd. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent, raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing alvorens de lenzen te dragen.

PORTUGUÊS | Instruções de utilização

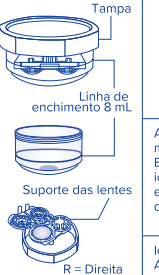
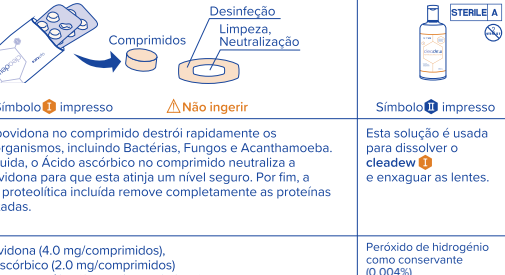
Sistema de desinfecção, limpeza e armazenamento para lentes de contacto macias.

PARA TODAS AS LENTES DE CONTACTO MACIAS, INCLUINDO LENTES DE HIDROGEL DE SILICONE

Leia com atenção este folheto de instruções antes de utilizar o cleadow e guarde-o para futuras consultas. Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.

COMPOSIÇÃO E DESCRIÇÃO

Não utilize o cleadow caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.

cleadow Estajo das lentes	cleadow 1 (Comprimidos de Desinfecção, Neutralização e Limpeza)	cleadow 2 (Solução Dissolvente e de Enxagamento)
		
	Símbolo 1 impresso. Não ingerir.	Símbolo 2 impresso.
	A Iodopovidona no comprimido destrói rapidamente os micro-organismos, incluindo Bactérias, Fungos e Acanthamoeba. Em seguida, o Ácido ascórbico no comprimido neutraliza a Iodopovidona para que esta atinja um nível seguro. Por fim, a enzima proteolítica incluída remove completamente as proteínas depositadas.	Esta solução é usada para dissolver o cleadow 1 e enxaguar as lentes.
	Iodopovidona (4.0 mg/comprimidos), Ácido ascórbico (2.0 mg/comprimidos) e enzima proteolítica (0.5 mg/comprimidos)	Peróxido de hidrogénio como conservante (0,004%) Ácido bórico

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1

Abrase os suportes das lentes e coloque cada uma das lentes no respetivo recetáculo. Feche cuidadosamente os suportes das lentes.



2

Coloque um comprimido de cleadow 1 no fundo do estajo das lentes, colocando-o no centro do fundo. Encha o estajo com cleadow 1 até à linha de enchimento. Feche a tampa com firmeza. Não utilize comprimidos descolorados ou partidos.



3

Laranja Limpa

Deixe as lentes na solução durante pelo menos 4 horas. O processo de limpeza começa assim que a solução tiver mudado de cor.



4

Verifique a cor!

Certifique-se de que a solução e as lentes estão completamente limpas. Se a cor laranja se mantiver por além das 4 horas, consulte as PRECAUÇÕES abaixo.



5

Retire as lentes.

Enxague as lentes na palma da mão com cleadow 2 antes de as colocar nos olhos.



6

Enxague as lentes na palma da mão com cleadow 2 antes de as colocar nos olhos.

ARMAZENAMENTO

Após completar os passos acima, deverá substituir a solução por cleadow 1, caso vá armazenar as lentes durante mais de 24 horas. Após a substituição da solução, as lentes devem ser armazenadas no respetivo estajo fechado até 7 dias e repetir desde o início os passos do cuidado antes de colocar as lentes nos olhos.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilize o cleadow caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Caso sinta desconforto persistente nos olhos, lacrimejar excessivo, alterações de visão ou olhos vermelhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- Não utilize o cleadow com outros medicamentos para os olhos ou produtos de cuidado de lentes de contacto.

PRECAUÇÕES

- Leia com atenção este folheto de instruções antes de utilizar o cleadow e guarde-o para futuras consultas. Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares.
- Não reutilize a solução. (Após o tratamento da lente, a solução fica neutralizada, o que impossibilita a respetiva desinfecção. Para prevenir a infeção ocular, não reutilize a solução).
- Se a solução não ficar alaranjada depois de adicionar um comprimido, descarte a solução, lave e seque o estajo das lentes e repita os passos do cuidado desde o início, de acordo com as instruções de utilização.
- Não coloque as lentes nos olhos caso persistam as manchas laranja.
- Consulte um profissional da saúde caso tenha usado lentes que não foram utilizadas.
- Certifique-se de que a solução e as lentes estão completamente limpas antes de colocar as lentes nos olhos. Se a cor laranja se mantiver por além das 4 horas, agite levemente o estajo das lentes e deixe-o de lado durante 20-30 minutos. Verifique se a cor desapareceu. Se a cor laranja persistir, descarte a solução e repita os passos do cuidado desde o início.
- Após cada utilização, descarte a solução e o comprimido restante no estajo das lentes.
- Após cada utilização de cleadow, lave o estajo das lentes com solução salina esterilizada e deixe-o a secar ao ar.
- As crianças não deverão utilizar o cleadow sozinhas; os pais deverão responsabilizar-se pelo seu cuidado diário.
- Utilize apenas o estajo de lentes especialmente concebido para o cleadow.
- Descarte a solução restante 3 meses após a abertura do recipiente.
- Utilize sempre o cleadow 1 juntamente com o cleadow 2.
- Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
- Não utilize o cleadow com lentes duras ou rígidas permeáveis aos gases.
- Não ingira a solução nem os comprimidos.
- Não toque na tampa do cleadow 2 de forma a evitar a contaminação.
- Não utilize o cleadow para efetuar desinfecção por calor.
- Não utilize comprimidos partidos.
- Não utilize o cleadow uma vez expirada a data de validade.
- Não utilize a solução nem os comprimidos se estes estiverem descolorados.
- Não utilize cleadow que não apresente selo de segurança ou cujo selo esteja danificado.
- Não utilize água da torneira para armazenar e enxaguar as lentes.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Armazene os produtos num local seco à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Não substitua o cleadow 1 por nenhum outro recipiente.
- Não utilize o cleadow com um estajo de lentes velho.
- Utilize o comprimido imediatamente após a abertura da embalagem.
- Guarde sempre os comprimidos nas respetivas embalagens de alumínio quando não forem utilizados.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar um profissional da visão.
- O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Apesar de este produto também conter ácido bórico, a sua concentração não constitui um perigo para a saúde. O produto pode ser utilizado com segurança por crianças e mulheres grávidas ou lactantes, desde que sejam seguidas as instruções de utilização. A sensibilidade aos produtos químicos varia de pessoa para pessoa. No caso de indivíduos sensíveis, recomenda-se a lavagem da lente com uma solução salina estéril antes da utilização.
- Na embalagem não é indicado o cleadow 1.
- Não utilize o cleadow com lentes duras ou rígidas permeáveis aos gases.
- Não ingira a solução nem os comprimidos.
- Não toque na tampa do cleadow 2 de forma a evitar a contaminação.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Οδηγίες Χρήσης

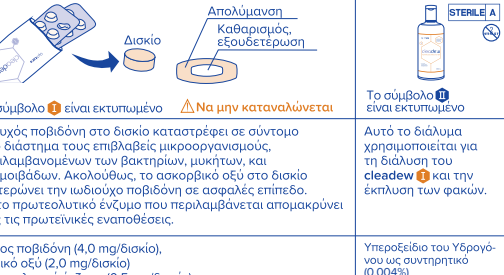
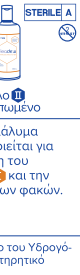
Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού και αποθήκευσης για μαλακούς φακούς επαφής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το cleadow και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για να αποφύγετε οφθαλμικές μολύνσεις ή βλάβες, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μην χρησιμοποιείτε το cleadow εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στο cleadow.

cleadow Θήκη φακών	cleadow 1 (Δισκία απολύμανσης, εξουδετέρωσης και καθαρισμού)	cleadow 2 (Διάλυμα για διάλυση & Έκπλυση)
		
	Το σύμβολο 1 είναι εκτυπωμένο. Να μην καταναλώνεται.	Το σύμβολο 2 είναι εκτυπωμένο.
	Η ιωδιούχος ποβιδόνη στο δισκίο καταστρέφει σε σύντομο χρονικό διάστημα τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, μυκήτων, και ακανθαμοιβδών. Ακολούθως, το ασκορβικό οξύ στο δισκίο εξουδετερώνει την ιωδιούχη ποβιδόνη σε ασφαλή επίπεδο. Τέλος, το πρωτεολυτικό ένζυμο που περιλαμβάνεται απομακρύνει πλήρως τις πρωτεϊνικές εναποθέσεις.	Αυτό το διάλυμα χρησιμοποιείται για τη διάλυση του cleadow 1 και την έκπλυση των φακών.
	Ιωδιούχος ποβιδόνη (4,0 mg/δισκίο), Ασκορβικό οξύ (2,0 mg/δισκίο) και Πρωτεολυτικό ένζυμο (0,5 mg/δισκίο).	Υπεροξείδιο του Υδρογόνου ως αναπτητήρας (0,004%) Βορικό οξύ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1

Ανοίξτε τη θήκη των φακών και τοποθετήστε τον κάθε φακό στον αντίστοιχο θάλο. Κλείστε τη θήκη με προσοχή.



2

Τοποθετήστε ένα δισκίο cleadow 1 στη θήκη των φακών, στο κέντρο του πυθμένα. Γεμίστε τη θήκη με cleadow 1 μέχρι τη γραμμή πλήρωσης. Κλείστε καλά το καπάκι. Μην χρησιμοποιείτε το δισκίο εάν είναι αποχρωματισμένο ή σπασμένο.



3

Εμβατίστε τους φακούς για τουλάχιστον 4 ώρες. Η διαδικασία καθαρισμού ξεκινά μετά την αλλαγή του χρώματος του διαλύματος.



4

Ελέγξτε το χρώμα!

Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα και οι φακοί είναι εντελώς διαφανείς. Εάν το πορτοκαλί χρώμα παραμείνει ακόμη και μετά από 4 ώρες, ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ που βρίσκεται παρακάτω.



5

Αφαιρέστε τους φακούς.

Αφαιρέστε τους φακούς, τυνώντας το χερούλι σας με cleadow 2.



6

Πρωτό τους φορέσετε.

Εμφύλντε τους φακούς στην παλάμη του χεριού σας με cleadow 2.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, σε περίπτωση αποθήκευσης των φακών για περισσότερες από 24 ώρες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το διάλυμα με cleadow 1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους φακούς στην κλειστή θήκη έως και 7 ημέρες, και στη συνέχεια να επαναλάβετε τα βήματα φροντίδας από την αρχή πριν φορέσετε τους φακούς σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το cleadow εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στο cleadow.
- Εάν αισθανθείτε επίμονη ερυθρότητα στα μάτια, υπερβολική δακρύρροια, αλλαγές στην όραση ή ερυθρότητα στους οφθαλμούς, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο σας ή έναν επαγγελματία οφθαλμικής υγείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το cleadow μαζί με οποιοδήποτε οφθαλμικό φάρμακο ή άλλα προϊόντα φροντίδας φακών επαφής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το cleadow και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για την αποφυγή οφθαλμικών λοιμώξεων, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. (Το διάλυμα μετά τη φροντίδα των φακών εξουδετερώνεται και δεν μπορεί να απολυμάνει τους φακούς. Για να αποφύγετε τη μόλυνση των ματιών, μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα).
- Εάν το διάλυμα δεν γίνει πορτοκαλί αφού προσθέσετε ένα δισκίο, αφαιρέστε το διάλυμα, πλύνετε τα στεγνά της τη θήκη των φακών και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα φροντίδας από την αρχή, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Εάν το διάλυμα δεν γίνει πορτοκαλί αφού προσθέσετε ένα δισκίο, αφαιρέστε το διάλυμα, πλύνετε τα στεγνά της τη θήκη των φακών και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα φροντίδας από την αρχή, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Μην φοράτε τους φακούς σας εάν η πορτοκαλί χρωματική επιμένει.
- Μην καταναλώνετε το cleadow 1 με οποιοδήποτε άλλο δοχείο.
- Μην χρησιμοποιείτε το cleadow με παλιά θήκη φακών.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε την καινούρια θήκη φακών που παρέχεται.
- Χρησιμοποιήστε το δισκίο αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Φυλάξτε πάντα τα δισκία στη συσκευασία τους από οξυγόνο ή υγρασία τη μελλοντική ανοικτήρα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα ματάκια εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Παρότι το παρόν προϊόν περιέχει βορικό οξύ, η ποσότητα βορικού οξέος στο προϊόν είναι σε τέτοια συγκέντρωση που δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το παρόν προϊόν είναι ασφαλές για χρήση από παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες εάν τηρηθούν οι οδηγίες του προϊόντος. Η ευαισθησία στα χημικά διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για άτομα με ευαισθησία, η σύσταση είναι να επλένετε τον φακό με διάλυμα στεριού φυσιολογικού ορού πριν τον φορέσετε.
- Το βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να μειώσει τη μελλοντική γονιμότητα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα ματάκια εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Παρότι το παρόν προϊόν περιέχει βορικό οξύ, η ποσότητα βορικού οξέος στο προϊόν είναι σε τέτοια συγκέντρωση που δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το παρόν προϊόν είναι ασφαλές για χρήση από παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες εάν τηρηθούν οι οδηγίες του προϊόντος. Η ευαισθησία στα χημικά διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για άτομα με ευαισθησία, η σύσταση είναι να επλένετε τον φακό με διάλυμα στεριού φυσιολογικού ορού πριν τον φορέσετε.
- Μην καταπιείτε το cleadow με ακλόνητος ή άκαμπτους αρθροπαθητικούς φακούς.
- Μην καταπιείτε το διάλυμα ή τα δισκία.

TÜRKÇE | Kullanım Talimatları

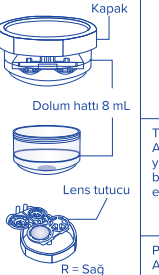
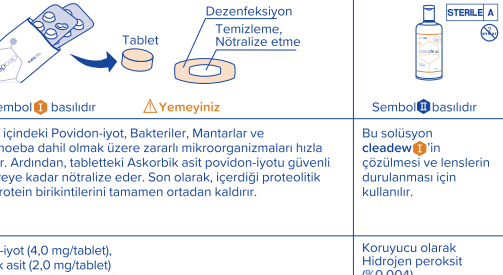
Yumuşak kontakt lensler için dezenfeksiyon, temizleme ve saklama sistemidir.

SİLİKON HIDROJEL LENSLER DAHİL TÜM YUMUŞAK KONTAKT LENSLER İÇİNDİR

Lees deze aanwijzingen goed door alvorens cleadow te gebruiken en bewaar ter referentie. Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwgezet op om mogelijke infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.

BİLEŞİM VE AÇIKLAMA

Cleadow de kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa cleadow'ı kullanmayınız.

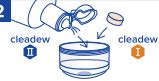
cleadow Lens kabı	cleadow 1 (Dezenfekte Edici, Nötralize Edici ve Temizleyici Tablet)	cleadow 2 (Çözme ve Durulama Solüsyonu)
		
	Sembol 1 basılır. Yemeyiniz.	Sembol 2 basılır.
	Tabletin içindeki Povidon-iyot, Bakteriler, Mantarlar ve Acanthamoeba dahil olmak üzere zararlı mikroorganizmaları hızla yok eder. Ardından, tabletteki Askoritik asit povidon-iyotu güvenli bir seviyeye kadar nötralize eder. Son olarak, içerdiği proteolitik enzim protein birikintilerini tamamen ortadan kaldırır.	Bu solüsyon cleadow 1'in çözülmesi ve lenslerin durulaması için kullanılır.
	Povidon-iyot (4.0 mg/tablet), Askoritik asit (2.0 mg/tablet) ve Proteolitik enzim (0.5 mg/tablet)	Koruyucu olarak Hidrojen peroksit (%0,004) Borik asit

KULLANICI TALİMATLARI



1

Lens tutucuları açın ve her bir lensi her bir kubbeye yerleştirin. Lens tutucuları dikkatle kapatın.



2

Lens kabına bir tablet cleadow 1 yerleştirin, alt kısmın ortasına koyunuz. Kabi dolum çizgisine kadar cleadow 1 ile doldurunuz. Kapağı sıkıca kapatınız. Rengi değişmiş veya kırılmışsa tableti kullanmayınız.



3

Turuncu Temizlik

Lensleri en az 4 saat bekletin. Temizleme işlemi solüsyon rengi değiştikten sonra başlar.



4

Rengi kontrol ediniz!

Solüsyonun ve lensin tamamen berrak olduğundan emin olunuz. Turuncu renk 4 saat sonra bile kalırsa, aşağıdaki UYARILAR'a bakınız.



5

Lensleri çıkarınız.



6

Lensleri takmadan önce avucunuzun içinde cleadow 2 ile durulayınız.

SAKLAMA

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, lensin 24 saatten fazla saklanması durumunda, solüsyonu cleadow 2 ile değiştirilmelidir. Eğer lensin saklanması 7 güne kadar saklayabilir ve ardından lensinizi takmadan önce bakım adımlarını baştan tekrarlayabilirsiniz.

İKAZLAR

- Cleadow' de kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa cleadow'ı kullanmayınız.
- Şuerekl göz rahatsızlığı, aşırı yaşama, görme değişiklikleri veya gözde kızamık oluşursa, lenslerinizi derhal çıkarınız ve göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
- Cleadow' i herhangi bir göz ilacı veya diğer kontakt lens bakım ürünleriyle birlikte kullanmayınız.

UYARILAR

- Cleadow' i kullanmadan önce bu talimat sayfasını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayınız. Göz enfeksiyonlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- Solüsyonu tekrar kullanmayınız. (Lens bakımı sonrası solüsyon nötralize olur ve lensi dezenfekte edemez. Göz enfeksiyonunu önlemek için solüsyonu tekrar kullanmayınız).
- Bir tablet ekledikten sonra solüsyon turuncuya dönmeye, solüsyonu atınız, lens kabını yıkayın kuruyun ve ardından kullanıcı talimatlarına uygun olarak bakım adımlarını baştan tekrarlayınız.
- Turuncu leke devam ederse lenslerinizi takmayınız.
- Nötralize edilemeyen lens kullandığınız göz doktorunuza danışınız.
- Lensleri takmadan önce solüsyonun ve lensin tamamen berrak olduğundan emin olunuz. Turuncu renk 4 saat sonra da değişmezse, lens kabını hafifçe sallayınız ve 20-30 dakika bir kenarda bekletiniz. Rengin kaybolup kaybolmadığını kontrol ediniz. Turuncu renk devam ederse, solüsyonu atın ve bakım adımlarını baştan tekrarlayınız.
- Lens kabında kalan temizleme solüsyonunu her kullanımdan sonra atınız.
- Her cleadow kullanımdan sonra, lens kabını steril salin solüsyonuyla yıkayınız ve kurutmayı bırakınız.
- Çocuklar cleadow' i kendi başlarına kullanmamalıdır; ebeveynlerin günlük bakımlarından sorumlu olmaları istenmektedir.
- Göz sağlığı uzmanına danışmadan lensin bakım sistemini değiştirmeyiniz.
- Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründe borik asit miktarı sağlik açısından tehlike oluşturmayacak bir düzeyde olacaktır.
- Bu ürün talimatlarına uyulduğunda solüsyon ve hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründe borik asit miktarı sağlik açısından tehlike oluşturmayacak bir düzeyde olacaktır.
- Çocuklar cleadow' i kendi başlarına kullanmamalıdır; ebeveynlerin günlük bakımlarından sorumlu olmaları istenmektedir.
- Göz sağlığı uzmanına danışmadan lensin bakım sistemini değiştirmeyiniz.
- Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründe borik asit miktarı sağlik açısından tehlike oluşturmayacak bir düzeyde olacaktır.
- Bu ürün talimatlarına uyulduğunda solüsyon ve hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründe borik asit miktarı sağlik açısından tehlike oluşturmayacak bir düzeyde olacaktır.
- Çocuklar cleadow' i kendi başlarına kullanmamalıdır; ebeveynlerin günlük bakımlarından sorumlu olmaları istenmektedir.
- Göz sağlığı uzmanına danışmadan