

CARE SYSTEM

with compliments



- 4. ENGLISH
- 6. ITALIANO
- 8. DEUTSCH
- 10. FRANÇAIS
- 12. POLSKI

- 1** Place contact lenses in provided, lens container. Fill with cleaning solution at least 80~100% full on both sides.
- 2** Place SWG 3.0 on a smooth table, bathroom counter-top, or mirror (vertical orientation is okay), and use the attached suction cup. Or, for silent operation, place on a soft cloth to dampen down vibration noise.
- 3** Choose preferred cycle by pushing the correspondant button: Left= Rapid (16 sec.) or Right=Extend (6 hours).

Notice:

To work properly, you must follow these simple steps (device initially needs to be fully recharged ~2 hours).

Device is NOT water-proof, so prevent full water immersion. Device is permanently sealed. Do not attempt to open.

Notes:

Cleaning mode may be stopped at any time by pushing both Left&Right side buttons for 1 second.

30-day LCD reminder counter may be reset by pushing both buttons (Left & Right sides) simultaneously, for 5 seconds. Device will flash and reset counter to 30-days.

Remember to recharge device once a month, or when battery is low. Device will automatically 'shut-off' when battery is fully discharged. Alternatively, you may leave always charged via a USB-micro wall charger, like a cell phone. Battery empty-to-full charge takes approximately 2 hours.

Trouble Shoot Guide:

If device is clearly non-responsive, try the following:

1. Push Left&Right buttons simultaneously. This is the universal 'Enter/Esc' key for this device.
2. Try recharging device again. Green-LED indicates USB power is available, Orange LED indicates battery is charging. Orange LED will go out after fully charged.
3. If continuously difficult to start, or LEDs flash frequently in standby mode, try placing device on a different surface and away from other high power electrical appliances.
4. If word "**Lo**" appear on the display, it means that device battery is running down. SWG 3.0 needs to be fully recharged as soon as possible.

It is recommended that you use the provided USB cable to recharge. If you have any troubles recharging the device, try another USB source such as a computer port, phone recharger with USB-micro plug, etc. Charge current is approximately 200mA, which corresponds to USB V1.0 specification and above (ie. Any standard USB port is compatible).

Magnetic lens case adapter is designed to be re-used. Simply pull the six-legs from the lens container indents and snap onto a fresh Safilens lens container when appropriate.

Battery life is normally 300 full charges. Battery is a Li-Ion type battery, and is fully fused and protected. Battery is rated 3.7v and 350mAh.

- 1** Riporre le lenti a contatto nel portalelenti. Riempire entrambi i contenitori con la soluzione unica.
- 2** Posizionare l'SWG 3.0 su una superficie liscia, come il mobile del bagno, oppure lo specchio (va bene anche la posizione verticale) utilizzando la ventosa. Per rendere silenziosa l'operazione posizionare un panno sotto l'apparecchio, in modo da ridurre il rumore dato dalle vibrazioni.
- 3** Scegliere il ciclo preferito premendo il pulsante corrispondente : Sinistro = Rapido (16 secondi) Destro= Esteso (6 ore).

Avvertenze:

Affinchè l'apparecchio funzioni correttamente, vanno seguite queste semplici indicazioni (l'apparecchio inizialmente va caricato completamente – il tempo necessario sono circa 2 ore)

L'apparecchio **NON** è resistente all'acqua perciò evitare di immergerlo. E' completamente sigillato. Non tentare di aprirlo.

Note:

La modalità “pulizia” può essere interrotta in ogni momento premendo contemporaneamente i pulsanti destro e sinistro, per un secondo.

Il contatore LCD impostato per il conto alla rovescia dei 30 giorni può essere reimpostato premendo entrambi i pulsanti (destro e sinistro) contemporaneamente. L'apparecchio lampeggerà e riporterà il contatore a 30 giorni.

Ricordarsi di ricaricare l'apparecchio una volta al mese, o comunque quando la batteria si sta scaricando. L'apparecchio si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. In alternativa è possibile ricaricarlo sempre tramite il cavo USB incluso, come si fa con un telefono cellulare. La ricarica completa della batteria richiede circa 2 ore.

Guida alla risoluzione di eventuali problemi:

Se l'apparecchio risulta non funzionante, provare le seguenti opzioni:

1. Toccare con le dita simultaneamente entrambi i pulsanti destro e sinistro. Questa è la chiave universale di avvio/blocco per questo macchinario.
2. Provare a ricaricare nuovamente l'apparecchio. Il LED verde indica che il cavo USB è funzionante, il LED arancio indica che la batteria è in carica. Il LED arancio si spegnerà a carica completata.
3. Se persistono problemi nell'accensione, oppure i LED lampeggiano frequentemente in modalità standby, provare a posizionare l'apparecchio su una superficie diversa e lontano da altri apparecchi elettronici.
4. Se sul display compare la dicitura “Lo” significa che la batteria del dispositivo si sta scaricando. Appena possibile procedere a ricaricare completamente l'apparecchio.

Si raccomanda di usare sempre il cavo USB incluso per ricaricare la batteria. Dovessero presentarsi problemi nel ricaricare l'apparecchio, provare con un altro attacco USB come un pc portatile, un carica batterie per cellulare con presa USB etc. La carica è approssimativamente 200mA, che corrisponde allo standard USB 1.0 (qualsiasi attacco USB è compatibile)

L'adattatore del portalenti è riutilizzabile. Tirare le 6 reglette delicatamente in modo da estrarre il vecchio portalenti per sostituirlo con un nuovo portalenti Safilens quando necessario.

La batteria ha normalmente una durata di 300 ricariche complete. E' di tipo Li-Ion ed è completamente protetta. (3.7v / 350mAh)

- 1** Legen Sie die Kontaktlinsen in den mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter. Füllen Sie beide Seiten vollständig mit Ihrer All in One Lösung.
- 2** Platzieren Sie das SWG 3.0 auf einen glatten Tisch, Badezimmerschränkchen oder mit Hilfe des Saugnapfes senkrecht an einen Spiegel. Um das Vibrationsgeräusch zu vermeiden, können Sie das Gerät auch auf ein Handtuch legen.
- 3** Wählen Sie die gewünschte Aktion durch Drücken der entsprechenden Taste: Links= Schnellspülen (16 Sek.) oder Rechts= Reinigungsprogramm (6 Stunden mit 15 Minuten Zyklen)

Achtung:

Für einen problemlosen Gebrauch beachten Sie bitte die folgenden Schritte (vor der Inbetriebnahme das Geräts ca. 2 Stunden aufladen)

Das Gerät ist nicht wasserdicht, vermeiden Sie daher direkten Wasserkontakt. Das Gehäuse ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen.

Hinweise:

Das Reinigungsprogramm kann jeder Zeit unterbrochen werden. Hierzu bitte beide Tasten (R/L) für ca. 1 Sekunde gleichzeitig drücken.

Das LCD Display mit dem 30 - Tage Timer kann durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten für 5 Sekunden zurückgestellt werden. Das Gerät blinkt und der Timer wird auf 30 zurückgestellt.

Achten Sie darauf, das Gerät mindestens einmal monatlich, oder bei leerem Akku aufzuladen. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku vollständig entladen ist. Sie können das Gerät auch, wie ein Mobiltelefon, an der Ladestation belassen und benutzen. Ein vollständiges Aufladen des Akkus dauert ca. 2 Stunden.

Fehlerbehebung:

Falls das Gerät nicht reagiert, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Drücken Sie die R/L Tasten gleichzeitig. Dies ist die "reset" Kombination für das Gerät.
2. Versuchen Sie das Gerät erneut aufzuladen. Das grüne Licht zeigt verfügbare Spannung an, das orangefarbene den Ladevorgang. Sobald das Gerät aufgeladen ist, erlischt das orangefarbene Licht.
3. Falls es wiederholt zu Startproblemen kommt, oder die blauen LEDs willkürlich blinken, legen Sie das Gerät auf eine andere Oberfläche und weg von anderen elektrischen Geräten.
4. Falls „Lo“ auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass der Akku bald leer ist. Bitte laden Sie das SWG 3.0 schnellstens auf.

Es wird empfohlen, das mitgelieferte USB Kabel zum Aufladen zu verwenden. Falls Sie Probleme beim Aufladen haben, versuchen Sie es über eine andere USB Verbindung. Beispielsweise einen Computerausgang, ein Telefon Ladekabel mit Micro – USB und Ähnliches. Der Ladestrom hat ca. 200mA, was USB V1.0 und höher entspricht (in der Regel funktioniert jeder USB Anschluss).

Der magnetische Clip für den Aufbewahrungsbehälter ist wiederverwendbar. Ziehen sie vorsichtig die sechs kleinen Halterungen von dem Behälter weg und der Clip löst sich. Jetzt können Sie diesen an einen frischen Safilens Behälter anklicken.

Der voll geschützte und abgesicherte Li-Ion Akku hält normalerweise ca. 300 komplette Aufladungen. Die Leistung ist 3,7v und 350mAh.

- 1** Placez la lentille de contact dans l'étui fourni. Remplir les deux côtés complètement avec votre produit d'entretien tout en un.
- 2** Placez le SWG 3.0 sur une table, une partie supérieure du comptoir de salle de bains, ou un miroir lisse (l'orientation verticale est correcte), et utilisez la ventouse attaché. Ou, pour l'opération silencieuse, vous pouvez placer l'appareil sur un tissu mou.
- 3** Sélectionnez l'action souhaitée en poussant le bouton correspondant : gauche = rinçage rapide (16 sec) ou droite = programme de nettoyage (6 heures avec un cycle de chaque 15 minutes).

Attention:

Pour un rendement correct, veuillez s'il vous plaît suivre les étapes suivantes (charger l'appareil pendant environ 2 heures avant la première utilisation):

L'appareil n'est pas imperméable à l'eau, veuillez éviter donc le contact direct avec l'eau. Le boîtier est scellé et ne peut pas être ouvert.

Notes:

Le programme de nettoyage peut être interrompu à tout moment. Pour cela vous appuyez les deux boutons (R / L) en même temps pendant 1 seconde.

Le « compteur 30 jours » dans l'écran LCD peut être également remis à zéro en appuyant en même temps les deux boutons pendant 5 seconds. L'appareil clignote et la minuterie est placée en arrière sur le 30.

Assurez-vous que l'appareil est rechargé une fois par mois, ou quand les batteries sont vides. L'appareil se met automatiquement hors tension lorsque la batterie est complètement déchargée. L'appareil peut également être utilisé à la station de charge, comme un téléphone mobile. Le chargement complet de la batterie prend environ 2 heures.

Guide de dépannage:

Si l'appareil ne réagit pas, essayez le suivant :

1. Appuyez sur les deux boutons D / G en même temps. Ceci est la fonction de réinitialisation.
2. Prouvez de recharger l'appareil. La lumière verte indique tension disponible, la lumière orange indique la charge. Une fois que l'appareil est chargé, la lumière orange disparaît.
3. Si les problèmes de démarrage existent encore, ou les LED bleues clignotent fréquemment, placez l'appareil sur une autre surface et loin des autres appareils électriques.
4. Si "Lo" apparaît sur l'écran, il signifie que la batterie est bientôt vide. Chargez le SWG 3.0 le plus vite possible.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni pour charger. Si vous avez des problèmes charge, essayez une autre connexion USB. Par exemple, une sortie de PC, un câble de téléphone mobile ou similaire. Le courant de charge est d'environ 200mA, qui correspond à USB V1.0 ou plus (en général ça fonctionne avec toutes les ports USB).

Le clip magnétique pour l'étui est réutilisable. Tirez doucement les six petits crochets loin de l'étui et le clip s'enlève. Maintenant vous pouvez cliquer le clip sur un nouveau étui Safilens.

La batterie Li-Ion entièrement protégé et sécurisé détient généralement environ 300 charges complètes. La puissance est 3.7v et 350mAh.

- 1** Umieścić soczewki kontaktowe w dostarczonym pojemniku na soczewki. Następnie obie komory pojemnika napęlnić płynem wielofunkcyjnym używanym do czyszczenia soczewek kontaktowych (obie komory powinny być wypełnione w 80-100%).
- 2** Urządzenie (SWG 3.0) umieścić na gładkiej powierzchni takiej jak stół, półka łazienkowa lub lustro za pomocą dołączonej do urządzenia przyssawki (orientacja pionowa urządzenia jest akceptowalna). Dla uzyskania efektu cichszego funkcjonowania urządzenia można umieścić je na miękkim materiale, co zmniejszy szum wibracji.
- 3** Wybrać cykl pracy urządzenia, kładąc całą opuszkę palca na odpowiedniej stronie: lewa=cykl szybki „RAPID” (16 sekund), prawa=cykl przedłużony „EXTEND” (6 godzin).

Uwaga:

Proszę przestrzegać tych prostych kroków dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Przed pierwszorazowym użyciem należy w pełni naładować akumulator (przez około 2 godziny).

Urządzenie NIE JEST wodoodporne-proszę nie zanurzać go w wodzie. Urządzenie stanowi integralną całość-proszę nie próbować go otwierać.

Urządzenie służy jedynie pomocą w czyszczeniu soczewek kontaktowych. Proszę zawsze używać odpowiedniego płynu do dezynfekcji soczewek kontaktowych.

Informacje:

Cykl pracy może być zatrzymany w każdym momencie poprzez jednoczesne naciśnięcie prawego i lewego przycisku, przez 1 sekundę.

Licznik wskazujący ilość dni (począwszy od 30) na wyświetlaczu LCD, może być zresetowany poprzez jednoczesne naciśnięcie obu przycisków, po stronie prawej i lewej, przez 5 sekund. Urządzenie zasygnalizuje to świetlnie i przywróci licznik do pozycji „30”.

Proszę pamiętać, aby naładować akumulator urządzenia raz na miesiąc, lub kiedy jest niski poziom naładowania. Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, urządzenie samoczynnie się wyłączy. Urządzenie może też być pozostawione do ładowania w trybie ciągłym (podobnie jak np. telefon komórkowy) poprzez ładowarkę z wtyczką mikro USB. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 2 godzin.

Rozwiązywanie problemów:

Jeżeli urządzenie nie reaguje, proszę spróbować następujących działań:

1. Jednocześnie nacisnąć magnesy po prawej i lewej stronie opuszkami palców; jest to uniwersalny „Enter/Esc” klawisz dla tego urządzenia.
2. Ponownie naładować akumulator. Zielona dioda LED wskazuje, że dostępne jest zasilanie USB. Pomarańczowa dioda LED wskazuje na ładowanie akumulatora; po pełnym naładowaniu, pomarańczowa dioda LED zgaśnie.
3. Jeżeli problemy z uruchomieniem urządzenia powtarzają się, lub gdy diody LED migają z dużą

częstotliwością w trybie czuwania, proszę spróbować ustawić urządzenie na innej powierzchni, z dala od urządzeń elektrycznych.

4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” oznacza to, że akumulator urządzenia jest bliski rozładowania. Należy jak najszybciej, ponownie, naładować urządzenie SWG 3.0.

Zaleca się aby używać dostarczonego z urządzeniem kabla USB do ładowania akumulatora. W przypadku jakichkolwiek problemów z ładowaniem, proszę spróbować innego źródła zasilania USB jak np. port komputera, ładowarka telefonu komórkowego z wtyczką mikro USB, itp. Prąd ładowania to około 200mA, co odpowiada specyfikacji USB V 1.0 i wyżej (to oznacza, że każdy, standardowy, port USB będzie odpowiedni).

Adapter magnetyczny jest wielorazowego użytku. Przy wymianie na nowy pojemnik na soczewki kontaktowe, proszę odciągnąć sześć objemek adaptera, zdjąć adapter z używanego pojemnika i przełożyć na nowy pojemnik na soczewki z firmy Safilens.

Akumulator zwykle można w pełni naładować 300 razy. Dane akumulatora: typ litowo-jonowy, 3.7 V, 350mAh. Akumulator jest chroniony poprzez bezpiecznik.


RAPID



EXTENDED



RESET

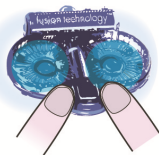

On charge



Charge
complete



Device is fully recharged in 2 hours

www.safilens.com